


Expansor Palatino Sel'P



OrthoExpand
Expanding Innovation

Sistema de auto-activación y guía de pistón

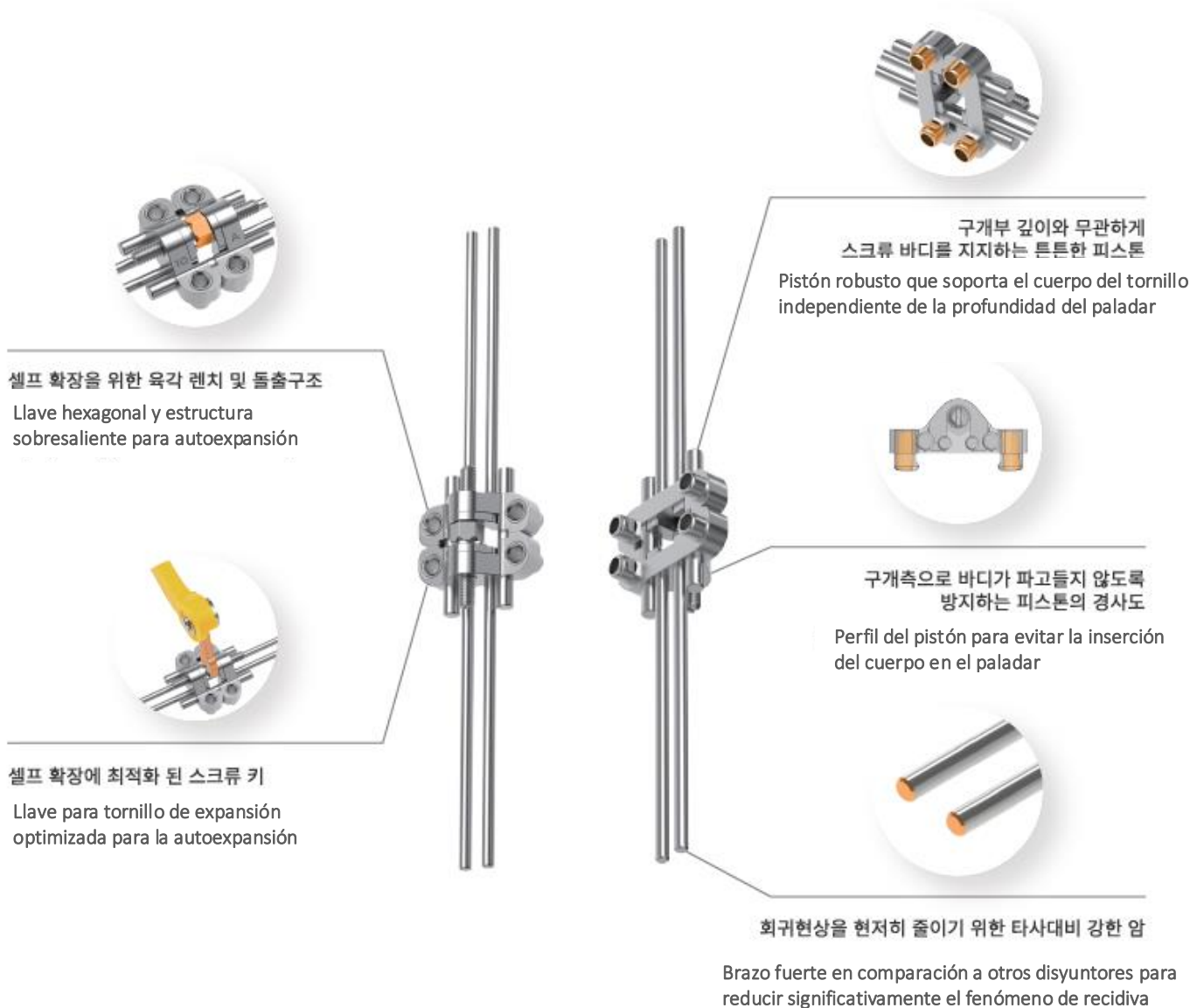


Instrumentos

Mango con llave




Llave para microtornillo de expansión

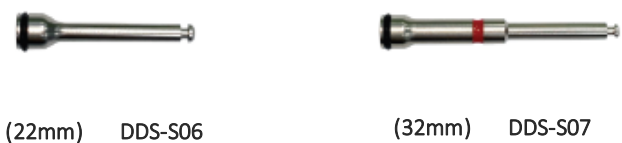

Destornillador Manual



Microtornillo para expansión palatina

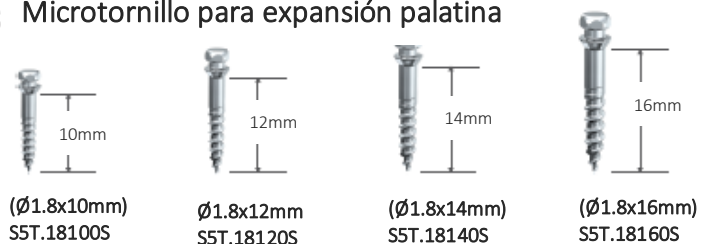


Activación de Sel'P

Protocolo de Expansión



6 giros = 1 revolución (1 giro = 0.133mm)
Adultos 2 giros/día

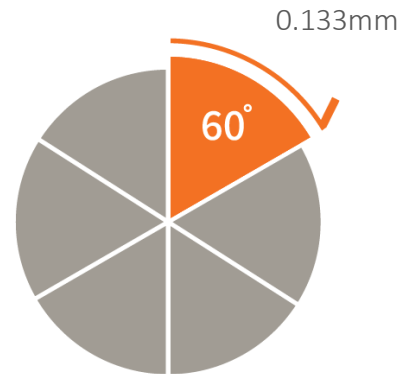

6 giros = 0.8mm
Tornillo de expansión de 10mm = 75 giros
Tornillo de expansión de 8mm = 60 giros

Unidad: mm

T4A.08060			2.0	17.8	8	0.8
T4A.10060			2.0	19.8	10	0.8

“더 이상 환자분 외 다른 분에게 확장을
부탁할 필요가 없습니다. 환자 본인이
작동시키는 RPE입니다.”

“Olvidate de pedir ayuda: con este
expansor palatino auto-activado, ¡tú lo
controlas!



OrthoExpand
Expanding Innovation

Distribución exclusiva en Latinoamérica